



Dräger




Oratect®

HDTG



Instruzioni per l'applicazione giornaliera

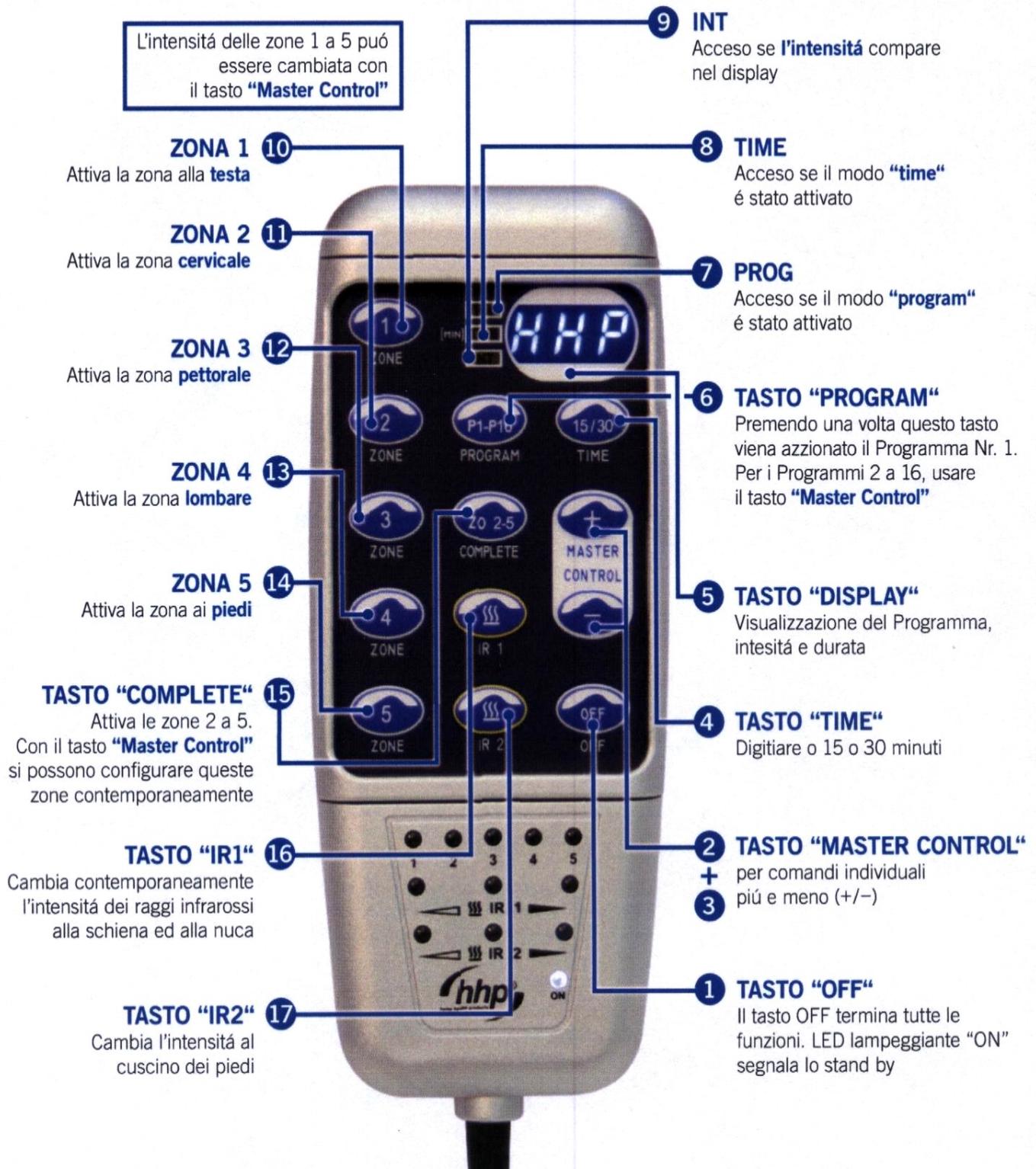



Oratect®



PROGRAMMI BASE

Programmi base	PROGRAMMA P01	Riscaldamento	Per riscaldarsi; rilassamento della muscolatura.
	PROGRAMMA P02	Massaggio muscolare di profondità	Alleviamento dei dolori e tensioni muscolari; vitalizzazione; favorisce il benessere fisico; stimolazione del metabolismo.
	PROGRAMMA P03	Stimolazione del sistema linfatico	Stimolazione del sistema linfatico; smantellamento dei prodotti del metabolismo; favorimento della depurazione; sostegno riflusso venoso.
	PROGRAMMA P04	Contrazioni	Sbloccamento di contrazioni della muscolatura; stimolazione della circolazione del sangue.
	PROGRAMMA P05	Rilassamento profondo	Rilassamento profondo; Riduzione di stress e recupero di nuove energie; attivazione delle forze rigenerative fisiche; sostegno in caso di disturbi del sonno.
	PROGRAMMA P06	Stimolazione delle zone di riflesso die piedi	Riduzione di dolori; contro disturbi circolativi nelle gambe e piedi; Stimolazione del sistema linfatico e della circolazione del sangue; rinforzo del sistema immunitario.

PROGRAMMI MEDICI

Programmi medici	PROGRAMMA P07	Tensioni	Contro dolori di schiena e tensioni ai muscoli della schiena; soluzione di miogelosi.
	PROGRAMMA P08	Dolori di schiena gravi	Contro disturbi gravi della schiena nella regione lombare; disturbi sciatici; applicazione in caso di lombaggine e crampi ai polpacci.
	PROGRAMMA P09	Micrania e dolori di testa	Contro dolori di testa; micrania e tensione alla muscolatura della nuca; contro dolori di spalle.
	PROGRAMMA P10	Problemi ai snodi	Contro dolori dei snodi; artrosi e reuma; contro osteoporosi.
	PROGRAMMA P11	Rassodamento tessile	Stimolazione del sistema linfatico; Favorimento della depurazione; drenaggio tessile; contro la cellulite.
	PROGRAMMA P12	Disturbi del metabolismo	Favorisce il metabolismo specialmente in caso di sovrappeso; contro problemi digestivi; contro gonfiore di gambe.
	PROGRAMMA P13	Rigenerazione dopo lo sport	Rigenerazione rapida dopo lo sport ed attività fisiche; dolori muscolari; favorisce lo smantellamento di prodotti del metabolismo.
	PROGRAMMA P14	Problemi digestivi	- Applicazione del programma a pancia in giù - Stimolazione dell'attività intestinale; contro problemi digestivi; eleva la circolazione del sangue negli organi; stimolazione della muscolatura del ventre.
	PROGRAMMA P15	Rilassamento	Riduzione di stress e rilassamento; contro problemi di sonno.
	PROGRAMMA P16	Programma di Sport	Applicazione prima e dopo lo sport; attiva la muscolatura; riduzione di dolori e tensioni muscolari; rigenerazione rapida.